




neodisher® PreStop

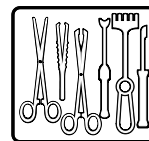

Korrosjonsstopp for forbehandling av kirurgiske instrumenter

Sprayskum

Bruksområde:

- Korrosjonsbeskyttelse som skal sprayes på kirurgiske instrumenter direkte etter bruk på operasjonsstuen.

Omfang:

- Korrosjonsstopp: Forhindrer groppkorrosjon på instrumenter av rustfritt stål som blivende rester fra blod eller fysiologisk saltløsning kan forårsake
- Selvstendig forhåndsrengjøring, allerede på operasjonsstuen
- Egnet for kirurgiske instrumenter inkl. MIC-instrumenter
- Eloksert aluminium må testes før bruk av sprayen

Spesielle egenskaper:

- Forhindrer at rester fra operasjonen tørker inn pga. at instrumentene holdes fuktige
- Gjør senere rengjøring lettere
- Hemmer vekst av mikroorganismer på instrumentene under kontakttiden (bakteriostatisk)

Bruk og dosering:

neodisher PreStop påføres de kirurgiske instrumentene i avfallsbeholderen ufortynnet direkte etter operasjonen ved hjelp av skumsprøyten. Deretter holdes avfallsbeholderen lukket. Instrumentene som behandles med neodisher PreStop kan oppbevares i opptil 72 timer. Deretter skylles de godt og behandles som normalt.

Generelle henvisninger for bruk:

- Kun for yrkesmessig bruk.
- For påføring av neodisher PreStop skal skumsprøyten som er inkludert i leveringen brukes.
- Må ikke blandes med andre produkter.

- neodisher PreStop skal skylles med vann (helst demineralisert).
- Reprosesseringen må utføres i samsvar med lovgivningen om medisinsk utstyr og gjeldende forskrifter ved bruk av egnede validerte prosedyrer.
- Vær oppmerksom på anbefalingene for reprosessering til produsenten av det medisinske utstyret tilsvarende kravene i DIN EN ISO 17664.

Tekniske data:

pH-verdi	9,5 (ufortynnet, 20 °C)
Tetthet	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Innholdstoffer:

< 5 % anioniske og amfotere overflateaktive stoffer i tillegg enzymer, konserveringsmidler (3-lod-2-propinylbutylkarbammat, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on)

CE-merking:



neodisher PreStop oppfyller kravene som følger av europeisk lovgivning om medisinsk utstyr.

Kontakt produsenten og ansvarlig myndighet, dersom det oppstår en alvorlig situasjon med dette produktet.

Henvisninger for oppbevaring/lagring:

En temperatur mellom 0 og 25 °C må overholdes ved lagring. Beholder holdes godt lukket. Beskyttes mot sollys. Kan brukes i 2 år ved riktig lagring. Kan brukes til: se stempel på etiketten bak symbol ☞.

Fare- og sikkerhetshenvisninger:

neodisher PreStop er ikke et farestoff iht. CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008. Beholdere må kun avhendes tomme og lukket. Avhending av materialrester: se sikkerhetsdatablad.





neodisher® PreStop

Ytterligere sikkerhets- og miljøinformasjoner finnes i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige under www.drweigert.de i seksjonen "Service/downloads".

MB 4086/2-4 Utgave: 05/2020



DR. WEIGERT

Opplysningene i dette memorandum baseres på dagens kunnskaper og erfaringer. Brukeren må allikevel utføre egne tester og forsøk.
Dette er ingen juridisk, forbindtlig garanti for bestemte egenskaper.